




## Kokkupandav tool Comfort 65XXL

3-jalane kokkupandav mugav tool – istme kõrgus 65 cm / 26" –  
kompaktne, kerge ja hõlpsasti õue kaasaskantav – kaasas  
kandekott – maksimaalne kandevõime 250 kg

Videojuhiste vaatamiseks skannige QR-koodi oma  
nutitelefoni või muu seadmega.

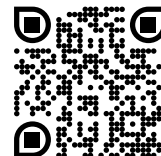

- Kokkupandav tool Comfort järgneb sulle kõikjale, kuhu lähed.
- See on piisavalt kompaktne, et seda kotis kaasas kanda, ja see võidatakse lihtsalt kokku.
- Saate jalad kiiresti välja sirutada ja lahti voltida ning see on stabiilne peaaegu kõikjal.
- Mugav istuda – teenitud puhkuseks igapäevasel jalutuskäigul, aiatöödel, kalapüügil või lõputus järjekorras ootamisel.
- Kokkupandav tool Comfort aitab kaitsta teie selga, põlvi ja liigeseid.
- Kokkupandav tool Comfort on saadaval erinevates kõrgustes ja istmesuurustes: 55XL, 65XXL ja 75XXL.



- 1 Voldi tool lahti.
- 2 Tõmmake jalad välja ja veenduge, et punased lukustusnupud on õiges asendis ja et need on pärast teleskoopjalgade väljatõmbamist nähtavad.
- 3 Kokkupandav tool Comfort on nüüd tavalisel istmekõrgusel kasutamiseks valmis.
- 4 Tabureti kokkuvoltimiseks pärast kasutamist vajutage punast nuppu, lükake teleskoopjalga tagasi avatud asendisse ja voltige taburet kokku.



- 5 Kokkupandaval Comfort-toolil on kaks istmekõrgust. Näiteks kui aiatöid tehakse madalal kõrgusel, siis istuge Comfort-kokkupandavale toole teleskoopjalgu pikendamata.



- ⑥ Kokkupandava mugava tooli alumiste jalgade lukustamiseks keerake jalgu nii, et need lukustuksid lähestikku asuvate kummist jalgadega. Kokkupandava mugava tooli kasutamiseks keerake seda vastassuunas ja avage alumised jalad.



- ⑦ Seda saab hõlpsalt kotti kokku voltida – valmis järgmiseks seikluseks.

## Kui teil on mugava kokkupandava tabureti jaoks „Steady” stabiilsusrihmad



Stabiilsed stabiilsusrihmad suurendavad Comfort kokkupandava tabureti ohutust ja stabiilsust pehmetel pindadel, näiteks liival või pehmel pinnasel.

- ① Steady kolme kinnituspunkti saab vastavalt teie Comfort kokkupandava tabureti suurusele muuta.
- ② Reguleerige kinnituspunkte õigesse asendisse.
- ③ Sisestage tabureti jalad Steady taskutesse.



Kokkupandava Comfort-tooli vale kasutamine võib põhjustada kehavigastusi või vigastusi. Enne Comfort-tooli kasutamist kontrollige alati, kas punane lukustusnupp on õiges asendis.

Olge ebatasasel pinnal Comfort kokkupandaval taburetil istudes ettevaatlik. Vältige istudes surve avaldamist ainult Comfort kokkupandava tabureti ühele või kahele jalale.

**Kokkupandav tool Comfort on Rootsi leiutis ja ainus kolmejalgne tool maailmas, millel on teleskoopjalad, patendid ja kaubamärgikaitse. See on kerge, kompaktne ja pakub suurepärast istumismugavust.**

### **Tootja :**

Scandinavian Touch AB  
Lindhagsgatan 5C  
531 40 Lidköping  
SWEDEN  
+4651025555