



Trionic jednoručna kočnica


Jednoručna kočnica koja istovremeno koči desnu i lijevu kočnicu.



① Sastavljanje: Trionic sustav jednoručne kočnice (slike prikazuju desnu stranu)

1. Montirajte ručicu kočnice na rukohvat (što je više moguće prema naprijed).
2. Odvrnite vijke (2 x 4 kom.) koji pričvršćuju poklopac desne i lijeve kočnice.
3. Pričvrstite kratku sajlu kočnice na kočnicu na istoj strani kao i ručica kočnice.
4. Pazite da vijak na kraju kabela bude okrenut prema van (u smjeru kotača).
5. Provcite dužu sajlu kočnice kroz okvir (između gornje i donje cijevi okvira).
6. Pričvrstite dužu sajlu kočnice na kočnicu koja se nalazi na suprotnoj strani ručice kočnice.
7. Izrežite malu rupu (2x) kroz tkaninu košare u svakom stražnjem donjem kutu (vidi CRVENE krugove na slici).
8. Pričvrstite duži kabel kočnice na košaru s 2 vezice.
9. Ponovno pričvrstite 2 poklopca kočnica koristeći 2 kabelaške vezice s rupom od Ø5 mm za 2 gornja vijka (desna + lijeva strana).

10. Provucite jednu od QR-osovina kotača (Ø12 mm) kroz petlju vezice i čvrsto zategnite vezicu oko osovine (osigurava ispravnu napetost kako bi se spriječilo trljanje sajle o gumu, ali bez pomjeranja sajle kočnice iz smjera).
11. Desna i lijeva sajla kočnice mogu se pojedinačno podešavati pomoću vijaka za podešavanje koji se nalaze na kočnici ili vijaka za podešavanje pričvršćenih na linearni duplikator.
12. Provjerite da li ručna kočnica potpuno blokira kotač.

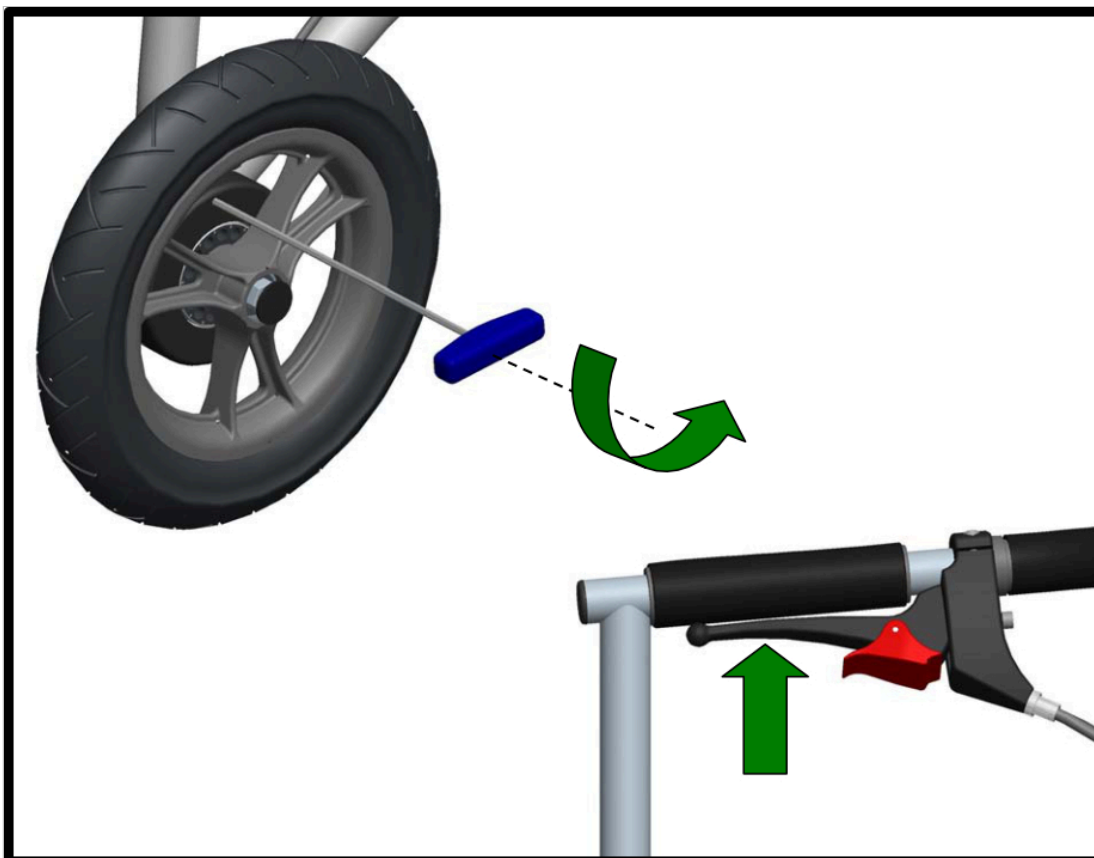

② Centriranje kočnice

1. Odvrnite vijak obruča kočnice za 3-4 okreta (dohvata se kroz otvor na poklopcu kočnice).
2. Povucite ručicu kočnice i čvrsto je držite.
3. Dok čvrsto držite ručicu kočnice, ponovno pritegnite vijak obruča kočnice.
4. Provjerite okreće li se kotač slobodno, bez trenja između kočnice/glavčine kočnice.

Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno se obratite našem voditelju proizvoda, Stefanu Kindbergu; +46-8-522 100 52.