




## Az első QR-tengely hosszának állítása

Biztonsági okokból ügyeljen a megfelelő beállításra!

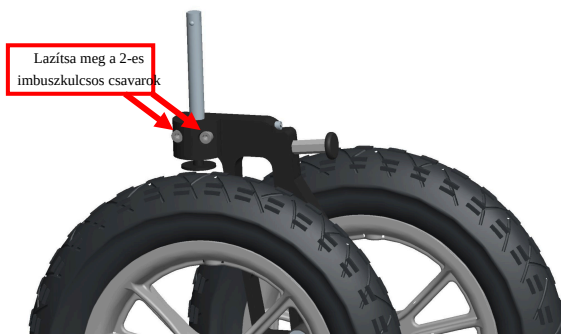

1. Lazítsd meg a 2 imbuszcsavart, és nyomd le a QR-tengelyt a villán keresztül, amíg a nagy tengelyanya láthatóvá nem válik.



2. Állítsd be a QR-tengely hosszát 11 mm-es és 19 mm-es villáskulcsokkal. A QR-tengely elfordulásának megakadályozásához tartsd meg a végét a 11 mm-es villáskulccsal. Állítsd be az anyát a 19 mm-es villáskulcs segítségével. Ha a tengely nem rögzül a vázba, elegendő az anyát  $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$  fordulattal az óramutató járásával ellentétes irányba forgatni.

3. Húzd meg újra a 2 villacsavart, hogy rögzítsd a QR-tengelyt a villához, majd próbáld meg rögzíteni az első felfüggesztést a vázhoz. Győződj meg róla, hogy teljesen a helyén van.

Ha bármilyen kérdése van, kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat: +46-8-522 100 50