




## Comfort opvouwbare kruk 75XXL

3-potige Comfort Opvouwbare Kruk - Zithoogte 75 cm/30" - Compact, lichtgewicht en gemakkelijk mee te nemen als u naar buiten gaat - Inclusief draagtas - Max. belasting 250 kg

Scan de QR-code met uw smartphone of toestel om de video-instructies te bekijken.

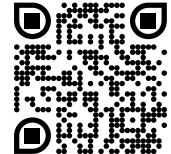

- De Comfort opvouwbare kruk volgt u overal.
- Het is compact genoeg om mee te nemen in uw tas en kan eenvoudig worden opgevouwen.
- De poten zijn snel uit te schuiven en uit te klappen, en hij staat vrijwel overal stabiel.
- Comfortabel om op te zitten – voor een welverdiende rustpauze tijdens uw dagelijkse wandeling, bij het tuinieren, vissen of wanneer u in de eindeloze rij staat.
- De Comfort opvouwbare kruk beschermt uw rug, knieën en gewrichten.
- De Comfort Folding Stool is verkrijgbaar in verschillende hoogtes met verschillende zitmaten: 55XL, 65XXL en 75XXL.



- 1 Vouw de kruk open.
- 2 Trek de poten uit en zorg ervoor dat de rode vergrendelknoppen in de juiste positie staan en dat ze zichtbaar zijn nadat u de telescopische poten hebt uitgeschoven.
- 3 De Comfort opvouwbare kruk is nu klaar voor gebruik op de normale zithoogte.
- 4 Om de kruk na gebruik op te vouwen, drukt u op de rode knop en duwt u de telescopische poot terug in de uitgeklapte positie, waarna u de kruk kunt opvouwen.



- 5 De Comfort Folding Stool biedt twee zithoogtes. Bijvoorbeeld, wanneer u in de tuin werkt op een lage hoogte, kunt u op de opvouwbare kruk zitten zonder de telescopische poten uit te schuiven.



- ⑥ Om de onderpoten te vergrendelen wanneer de Comfort Folding Stool is ingeklapt, draait u de poten zodat ze worden vergrendeld door de rubberen voetjes die dicht bij elkaar zitten. Om de Comfort Folding Stool te gebruiken, doet u het tegenovergestelde en kunt u de onderpoten ontgrendelen.



- ⑦ Hij is gemakkelijk op te vouwen en past in de draagtas. Klaar voor de volgende rust en het volgende avontuur.

### **Als u "Steady" stabiliteitsriemen voor de Comfort Folding Stool heeft**



De stevige banden verhogen de veiligheid en stabiliteit van de Comfort Folding Stool op zachte oppervlakken zoals zand of zachte grond.

- ① De drie bevestigingspunten van de Steady kunnen worden verplaatst, zodat ze passen bij de grootte van uw Comfort Folding Stool.
- ② Plaats de bevestigingspunten op de juiste positie.
- ③ Plaats de poten van de kruk in de uitsparingen van de Steady.



Onjuist gebruik van de Comfort opvouwbare kruk kan leiden tot lichamelijk letsel of letsel. Controleer de Comfort opvouwbare kruk altijd vóór gebruik om er zeker van te zijn dat de rode vergrendelknop in de juiste positie staat.

Wees voorzichtig bij het zitten op de Comfort Folding Stool op een oneffen ondergrond. Vermijd druk op slechts één of twee poten van de Comfort Folding Stool tijdens het zitten.

**De Comfort Folding Stool is een Zweedse uitvinding en de enige driepotige opvouwbare kruk ter wereld met telescopische poten, patenten en merkbescherming. Hij is lichtgewicht, compact en biedt superieur zitcomfort.**

#### **Fabrikant :**

Scandinavian Touch AB  
Lindhagsgatan 5C  
531 40 Lidköping  
SWEDEN  
+4651025555