

TRiONiC

Veloped Gebruiksaanwijzing



We willen u bedanken voor het kiezen van een Trionic Veloped!

Bedankt dat u voor ons Veloped heeft gekozen! We hopen oprecht dat u veel leuke momenten zult beleven en zowel off-road als in de stad zult genieten van uw Trionic.

Door te kiezen voor een Trionic Veloped zult u een hele reeks voordelen ontdekken. Het verbetert uw toegang tot verschillende buitenomgevingen en verhoogt hopelijk uw kwaliteit van leven.

Lees vóór gebruik de gebruikershandleiding zorgvuldig door en volg alle richtlijnen, vooral de veiligheidsinstructies.

Deze gebruikershandleiding bevat alle benodigde instructies voor het afstellen en bedienen van uw Trionic-rollator.

Deze gebruikershandleiding is bedoeld om alle gebruikers en ondersteuningspersoneel een basis te bieden voor het veilige gebruik van het product. In de handleiding vindt u informatie over de voorbereiding, het gebruik, het onderhoud en de service van uw rollator. Om op een verstandige manier optimaal gebruik te kunnen maken van

het apparaat en de betrouwbaarheid van het gebruik te behouden, dient u altijd de vermelde gebruiksinstructies na te leven. Zorg ervoor dat de gebruikershandleiding altijd toegankelijk is voor de gebruiker.

Deze gebruikershandleiding is bij het leveringspakket inbegrepen. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in de weergegeven versies van deze handleiding als gevolg van verdere technische ontwikkelingen aan te brengen.

Deze gebruikershandleiding is bij het leveringspakket inbegrepen. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in de weergegeven versies van deze handleiding als gevolg van verdere technische ontwikkelingen aan te brengen.

Hergebruiken door derden

Als u uw rollator aan een nieuwe gebruiker doorgeeft, vergeet dan niet alle technische documentatie mee te geven die nodig is om een veilig gebruik te garanderen. Trionic Sweden AB is niet verantwoordelijk voor de staat van het product wanneer het aan een nieuwe gebruiker wordt doorgegeven.

Veloped Gebruiksaanwijzing

Trionic Veloped

De Veloped heeft een uniek 3-wiel ontwerp, maar zoals u ziet heeft het in feite vier wielen. Het is bedoeld als loophulpmiddel, vooral voor mensen die de behoefte hebben om fysiek actief te zijn buiten de deur. Ontworpen met als doel om te wandelen en de mobiliteit van de gebruiker te verhogen, is de Veloped uniek in z'n soort. De voornaamste eigenschap is het dubbele voorwiel waarmee u obstakels tot 13 cm hoog kunt overwinnen. De kracht die u nodig heeft om lagere obstakels te bedwingen is, in vergelijking met een traditioneel wiel, eveneens verlaagd.

Aard:
Medisch hulpmiddel klasse I (MDR 2017/745)

Doel: Loophulpmiddel

Fabrikant:
Trionic USA, INC. • 1545 N. Verdugo Rd. • Glendale, CA 91208 • USA
info@trionic.us
818-480-1907

Datum van handmatige revisie:
2025-05-01

Technische gegevens

	12er M	12er L	14er M	14er L
Min. hoogte:	75 cm	82 cm	77 cm	84 cm
Max. hoogte:	95 cm	102 cm	97 cm	104 cm
Breedte:	76 cm	79 cm	76 cm	79 cm
Lengte:	102 cm	102 cm	107 cm	107 cm
Zittingshoogte:	58 cm	63 cm	60 cm	65 cm
Zittingsbreedte:	44 cm	44 cm	44 cm	44 cm
Wielmaat:	12"/31 cm	12"/31 cm	14"/36 cm	14"/36 cm
Afmeting opgeklapt:	L106xW42xH75 cm	L106xW42xH82 cm	L111xW42xH77 cm	L111xW42xH84 cm
Afmeting opgeklapt zonder wielen:	L84xW42xH59 cm	L84xW42xH68 cm	L84xW42xH59 cm	L84xW42xH68 cm
Gewicht (Veloped Sport):	11,4 kg	12,0 kg	11,9 kg	12,5 kg
Gewicht zonder wielen:	7,7 kg	8,3 kg	7,7 kg	8,3 kg
Max. gebruikersgewicht:	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg

Veiligheid

- Beide remmen dienen vergrendeld te zijn voordat u de zitting gebruikt.
- Zorg ervoor dat de Veloped helemaal uitgeklapt is voordat u gaat wandelen.
- Ben extra voorzichtig op steile hellingen of oneven terrein.
- De stabiliteit van de Veloped is getest met een gewicht van 5kg in het mandje. Zorg ervoor dat, wanneer u meer gewicht in het mandje plaatst, dat u deze gelijkmatig verdeeld in het mandje.
- BELANGRIJK: Mocht er zich bij u een ernstig ongeval of incident voordoen tijdens het gebruik van dit medische hulpmiddel, dan dient u het incident te melden aan de fabrikant en aan de bevoegde medische autoriteit in het land waar u woont.

Juiste hoogte handgreep



Hoe u de juiste hoogte van uw Veloped instelt

Veel rollatorgebruikers stellen de handgrepen te hoog in, omdat ze denken dat dit een rechtere houding bevordert. Maar in werkelijkheid verslechtert dit de houding en is het slecht voor de stabiliteit.

U kunt de juiste hoogte van de Veloped handgrepen bepalen door het volgende te doen, hetgeen alle fysiotherapeuten en rollatorfabrikanten aanbevelen:

1. Ga rechtop staan met een zo recht mogelijke rug, met uw schoenen aan en uw armen ontspannen langs uw lichaam (elleboog licht gebogen).
2. Meet de verticale afstand van de vloer tot het polsbot = aanbevolen hoogte handgreep.

Met de handgrepen op polshoogte:

- Hoeft u uw schouders niet op te trekken en kunt u een groter deel van uw lichaamsgewicht laten steunen.
- U kunt dicht bij de handgrepen lopen, hetgeen een rechtere lichaamshouding oplevert.
- Heeft u een meer verticale (neerwaartse) gewichtsverdeling, hetgeen zowel de stabiliteit als de remprestaties verbetert.

Bij het eerste gebruik



1. Plaats de achterwielen op de achterste as door de zwarte knoppen in het midden van het wiel in te drukken en, daarna, de as helemaal door het asgat te schuiven. Laat de drukknop los.



2. Controleer of de wielen stevig vastzitten door ze zijwaarts te trekken.




3. Maak op dezelfde manier de voorwielophanging vast aan de voorzijde van het frame door middel van het indrukken van de zwarte knoppen aan de onderkant van de as en de as vanaf onderen door het asgat te duwen. Laat de drukknoppen daarna los.



4. Controleer of het voorwiel stevig vastzit door het frame van de grond op te tillen en het wiel naar beneden te trekken.

5. Stel de hoogte van de handgrepen in zoals is beschreven in het hoofdstuk.


Wandelinstelling

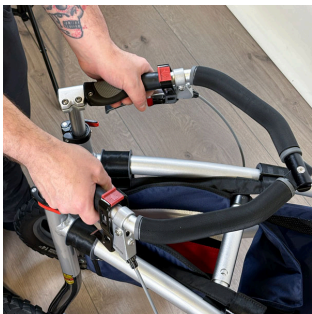

Klap de Veloped uit door de handgrepen van elkaar weg, naar buiten toe te trekken.




Controleer of de Veloped zich in de wandelstatus heeft vergrendeld. Luister goed of u hoort dat de telescoopstang zich vastklikt.

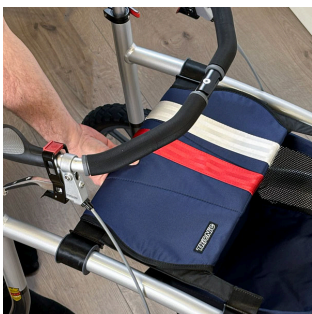


De stoel kan zowel naar voren- als naar achteren schuiven. Duw het voorwaarts om maximale wandelruimte te hebben.

Trek de stoel naar achteren voordat u de stoel gebruikt, iets uit het mandje wilt pakken of de Veloped wilt opvouwen.

De Veloped opvouwen

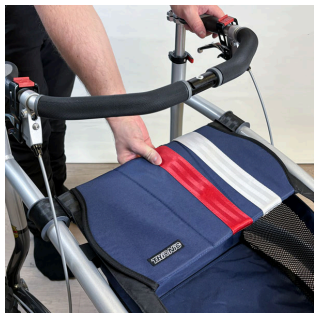


Trek de stoel naar achteren.

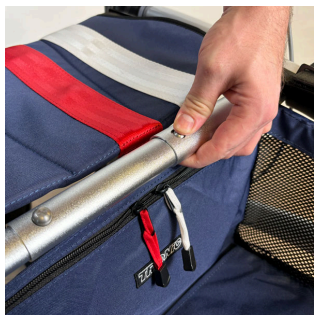


Druk de knop rechts op de telescoopstang in.

Til en vouw tegelijkertijd het ene deel van het frame tegen het andere deel.

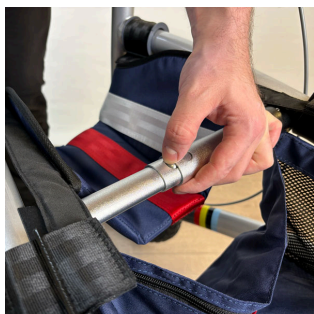


Druk de andere knop links op de telescoopstang in.

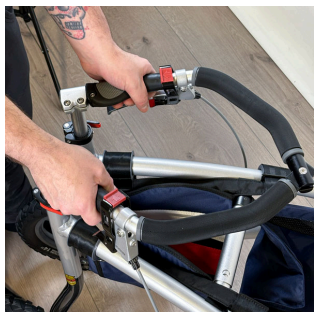


Til en vouw tegelijkertijd het ene deel van het frame tegen het andere deel om zo de Veloped helemaal op te vouwen.

Parkeerrem

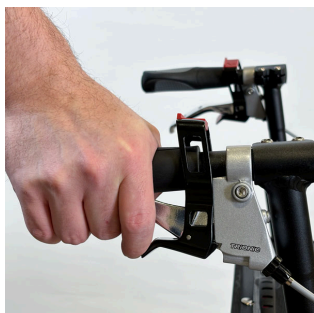


U kunt de parkeerrem op 3 verschillende manieren activeren.

Optie 1: Duw de onderste rode parkeerrem met uw wijsvinger naar beneden terwijl u, tegelijkertijd, de remhendel aantrekt. Stel vast dat de parkeerrem werkt en dat de Veloped zich niet beweegt.

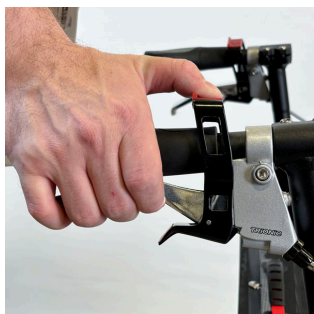


Optie 2: trek de bovenste rode parkeerrem met uw duim naar boven toe terwijl u, tegelijkertijd, de rem aantrekt. Stel vast dat de parkeerrem werkt.

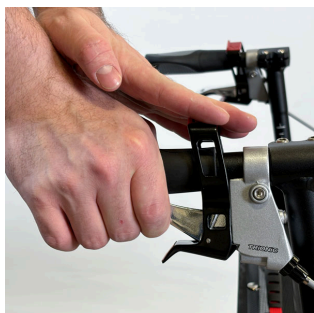

Optie 3: Gebruik beide handen. Trek de bovenste rode parkeerrem met één hand naar achteren toe terwijl u met uw andere hand de rem aantrekt. Stel vast dat de parkeerrem werkt.

Om de parkeerrem te ontkoppelen die u op dezelfde manier te remmen als dat u met de rijrem.

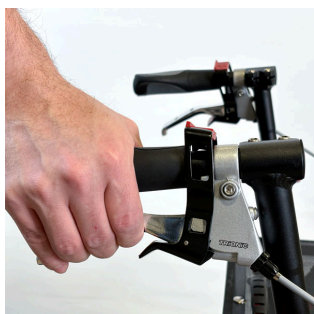

Rijrem

Trek de remhendel omhoog om de rijrem te activeren. Rem met beide remmen tegelijk.

Instellen van de handgreep



Ontgrendel beide snelkoppelingen door ze naar buiten toe te vouwen.

Stel de handgreep af op de gewenste hoogte. Het beste is op polshoogte vanaf de grond, wanneer u staat en uw armen loshangen. Vraag om hulp bij het opmeten!



OPMERKING: de eenvoudigste manier om de handgreep in te stellen is wanneer u zit op de stoel, zodoende kunt u de streepjes zie die de hoogte aangeven. Dat zal het instellen van de hoogte vereenvoudigen.



Vergrendel beide snelkoppelingen door de hendel naar binnen toe te vouwen.



LET OP! Gebruik de snelontkoppelaars niet als vleugelmoeren of schroeven. De snelkoppelaars kunnen vervangen worden door schroeven en moeren wanneer de vrees bestaat dat de gebruiker de snelkoppelaars per ongeluk zal openen tijdens het gebruik.

Afstellen van de handgreep

De hoek van de handgrepen kan worden aangepast zodat uw handen comfortabel geplaatst kunnen worden en u een optimale ondersteuning heeft.



1. Draai de schroef aan de achterkant van de handgreep los met een 4mm inbussleutel.



2. Draai/roteer de handgreep in de door u gewenste hoek.



3. Draai de schroef aan de achterkant van de handgreep vast met een 4mm inbussleutel.

Plaatsen van de achterwielen



Druk, om het wiel te verwijderen, de zwarte knop midden op het wiel in en trek het wiel los.

Druk, om het wiel te verwijderen, de zwarte knop midden op het wiel in en trek het wiel los.




Om het wiel vast te maken drukt u de zwarte knop midden op het wiel in en duwt u de wielas door het asgat. Laat de knop pas los wanneer het wiel op de juiste positie is.

Houd de band vast en duw/trek aan het wiel om vast te stellen dat het wiel stevig vast zit.



Remmen vergrendelen

1. Wanneer de remmen niet goed functioneren, draai dan de instellingsschroef los op elke remhendel (tegen de klok in) en breng ze terug in positie door de schroef vast te draaien. U doet dit door de schroef naar de hendel toe te draaien (met de klok mee).

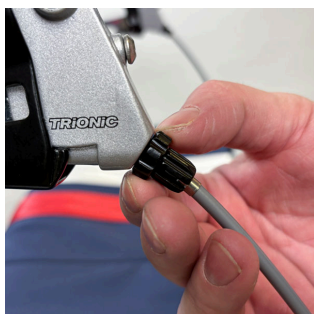

Neem contact op met uw verkoper, of de persoon die verantwoordelijk is voor het onderhouden van uw Trionic Veloped, wanneer de remmen nog steeds slecht functioneren.

Het voorwiel verwijderen/installeren



De voorwielophanging is verwijderbaar zodat u de Veloped eenvoudig kunt transporteren.

Druk de zwarte knop onder het voorste scharnier in zodat de voorwielophanging los kan komen.



Verwijder de gehele ophanging, til het voorste frame van de grond terwijl u de wielophanging naar beneden trekt.



Om de wielophanging te installeren dient u de voorzijde op te tillen, de zwarte knop in te drukken en de wielas door het asgat onder het frame te duwen. Laat de zwarte knop los.



Luchtdruk

Controleer de luchtdruk in de band regelmatig. Trionic raadt een luchtdruk van 1,5 – 2,0 bar aan.

Maximale luchtdruk in de band is 2,5 bar / 35 psi.

Instellingen van het voorwiel wijzigen:

Er is een verstelhendel op het voorwiel, tussen de wielen geplaatst, die tussen twee standen kan worden geschakeld.

off-road gebruik

Bovenste positie: Biedt verbeterde klimmogelijkheden, betere ophanging op oneven oppervlaktes en een hogere directionele stabiliteit. Draai het voorwiel 180 graden zodat u eenvoudig bij de instellingsgrendel kunt komen.

stadsgebruik

Lagere positie: Maakt eenvoudig draaien mogelijk terwijl de klimcapaciteiten behouden blijven.



1. Pak het linkerwiel vast met uw linkerhand en til de Veloped een klein beetje van de grond.



2. Terwijl u de Veloped omhoog houdt met uw linker hand grijpt u met uw rechterhand de zwarte knop met de groene streep en trekt u deze naar buiten toe (naar u toe).

3. Schuif de insteller (aan de rechterkant) naar beneden of Instellingen van het voorwiel wijzigen: stadsgebruik / off-road gebruik naar boven. Het is belangrijk dat u de insteller helemaal naar beneden of naar boven trekt.



4. Laat de zwarte knop los zodat deze terug kan springen en het voorwiel kan vastzetten in de door u gewenste positie.

5. Laat de zwarte knop los waarna deze terugveert en het voorwiel in de door u gekozen stand vergrendelt.

Afnemen/Aanbrengen van de mand

De mand van de Trionic Veloped kan 22kg bevatten. Het heeft een klein ritsvakje aan de achterkant. Hier kunt uw waardevolle spullen en kleine items in opbergen. De Veloped mand kan worden verwijderd en deze is met behulp van klittenband aan de mandrail van het frame bevestigd.



1. Steek de beide klittenbandflapjes van onderaf tussen het frame en de mandrail door. Buig ze daarna naar binnen en maak de klittenbandjes aan de binnenkant van de mand vast.



2. Bevestig het voorste klittenbandflapje op dezelfde manier.



3. Indien nodig maak de klittenband opnieuw vast totdat het mandje stevig vast zit.

LET OP! Zorg ervoor dat de plastic plaat onderin het mandje eerst wordt geplaatst voordat u het mandje aan het frame vast maakt.

Afnemen/Aanbrengen van zittingovertrek

De verplaatsbare zitting van de Veloped bestaat uit een basiszitting en een afneembare overtrek die met negen drukknoppen is bevestigd.



1. Pak de overtrek met de tekst Trionic aan de rechterkant beet. Steek de lange flap tussen de telescoopstang en de basiszitting.



2. Druk de drie voorste drukknoppen van de lange flap vast op de basiszitting.

3. Maak vervolgens de drie drukknoppen van de korte flap vast op de basiszitting.



4. Zet tenslotte de drie laatste drukknoppen van de lange flap vast aan de korte flap.

Veiligheidsvoorschriften

Controleer voor gebruik of de Trionic Veloped perfect werkt:

- Controleer de remfunctie en de parkeerrem.
- Zorg er voor dat het frame is gezekerd in de uitgeklapte wandelpositie.
- Controleer of de handgreep de juiste hoogte heeft en of deze goed is vergrendeld.
- Vermijd bij uitklappen aanraking met het voorste scharnier vanwege het risico van beknelling.
- Het maximumgewicht van de gebruiker mag niet hoger zijn dan 150 kg.T
- Gebruik de Trionic Veloped niet als rolstoel of voor personenvervoer. Een defecte Veloped mag niet worden gebruikt.
- De Trionic Veloped is bedoeld als loophulpmiddel, dat vooral beoogt de gebruiker steun te bieden bij fysieke verplaatsing.

Onderhoudsvoorschriften

Om een goede werking en de veiligheid te garanderen moet u erop toezien dat het onderstaande regelmatig wordt uitgevoerd:

- Maak de Veloped schoon met gewoon afwasmiddel, water en een theedoek. Droog hem goed af.
- Houd de wielen schoon met afwasmiddel, water en een kunststof borstel.
- Controleer of schroeven en hendels goed zijn aangedraaid.
- Als uw Veloped niet in perfecte conditie verkeert moet u direct contact opnemen met de verkoper/dealer of service vertegenwoordiger om uw Trionic Veloped te laten onderhouden.

Vergeet niet om elke 4-5 weken de bandenspanning te controleren. Trionic adviseert een bandenspanning van 1,5 bar/22 psi.

Trionic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ingrepen aan het product (aanpassingen, ondeugdelijke reparaties) die zonder voorafgaande toestemming zijn uitgevoerd.

Garantie

De Trionic Veloped komt met 10 jaar garantie, met uitzondering van de onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage (banden, buizen, remblokjes, remkabels, remkabelbehuizing en onderdelen van textiel). De garantie gaat in op het moment van aanschaf en is alleen van toepassing op originele Trionic delen.



CE - Trionic Sverige AB garandeert dat het bovengenoemde product voldoet aan de relevante wettelijke vereisten (1993:584) met betrekking tot medische producten, evenals aan de specificaties in de bepalingen voor medische producten (LVFS 2003:11). Het product voldoet aan de specificaties in

de EG-richtlijn betreffende medisch-technische producten 93/42/EEG.




Label

De Veloped is getest en goedgekeurd volgens de internationale norm voor rollators ISO 11199-2:2021 en voldoet aan de eisen van de EU-verordening voor medische hulpmiddelen MDR 2017/745.

Het maximum gewicht van de gebruiker bedraagt 150 kg.

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Productnaam | 10. Rollator gecertificeerd volgens |
| 2. Maximaal gebruikersgewicht | ISO 11199-2:2021 |
| 3. Lengte | 11. Lees de gebruikershandleiding |
| 4. Breedte | vóór gebruik. |
| 5. Maximum- en minimumhoogte | 12. Productcode: GTIN13 |
| 6. Datum fabricage | 13. Fabrikant |
| 7. UDI/Digitaal productpaspoort: | 14. CE-markering |
| GS1 QR-code (AIDC/HRI) | 15. Milieuvriendelijkheid |
| 8. Serienummer | 16. Medisch hulpmiddel |
| 9. Artikelnummer | 17. Product is goedgekeurd conform MDR 2017/745 |

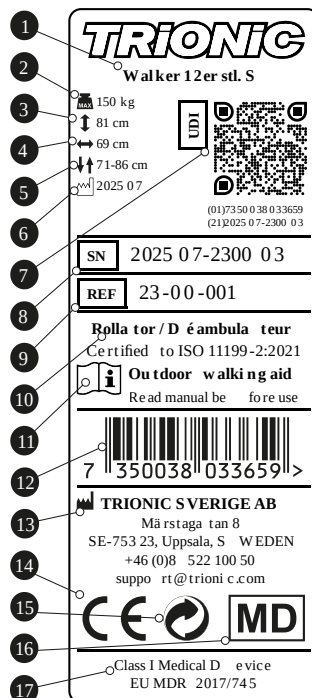

Milieuvriendelijkheid

De Trionic Veloped is zo gemaakt, dat de negatieve effecten op het milieu tijdens zijn levenscyclus zo gering mogelijk zijn. Als de levensduur van het product erop zit, kan het tot schroot worden verwerkt en kunnen de delen gerecycled worden.

- Bij de recycling worden de aluminiumcomponenten van het product gescheiden van de overige onderdelen. De onderdelen worden gesorteerd in metaal, kunststof en restmateriaal.
- Het product bestaat voor het grootste deel uit aluminium, staal en kunststof.
- Voorbeelden van componenten die uit restmateriaal bestaan zijn remhendels, wielen en handgreep.
- Omdat verschillende gemeenten/recyclingbedrijven anders omgaan met recyclingmateriaal, is het raadzaam in twijfelgevallen contact op te nemen met uw gemeente.

Trionic Sverige AB is aangesloten bij het "The Green Dot", een landelijk systeem voor de recycling van verpakkingen.



Veloped video productdemonstraties

Bekijk de instructies op je smartphone. Open je camera-app, richt deze op de QR-code en houd je telefoon stil totdat er een melding of link op je scherm verschijnt. Tik op de melding om de link te openen en begin de video te bekijken. Bovendien is er een handmatige link beschikbaar voor directe toegang tot de video op je computer. Aarzel niet om contact met ons ondersteuningsteam op te nemen als je problemen ondervindt of meer hulp nodig hebt.

Trionic Veloped - Hoe hem in de auto te plaatsen

De Trionic Veloped is het moderne, voor alle terreinen geschikte, alternatief voor de rollator. De video laat zien hoe de Veloped in de kofferruimte van de auto (VW Golf) geladen wordt.



Lees verder : qr.trionic.info/trunk

Hoe stel ik de remmen op mijn Veloped af?

Om ervoor te zorgen dat u uw Veloped/Walker veilig kunt gebruiken, moet u na verloop van tijd de remmen afstellen omdat deze slijten. Voor het afstellen van de remmen is een moersleutel van 8 mm nodig.



qr.trionic.info/brakes

The certificate features a decorative border made of blue wavy lines. At the top center is a red circular seal with a complex, concentric pattern. At the top right is a blue circular seal with a similar pattern. The title 'Certificaat van garantie' is centered in a bold, black, sans-serif font.

Certificaat van garantie

De Trionic Veloped komt met 10 jaar garantie, met uitzondering van de onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage (banden, buizen, remblokjes, remkabels, remkabelbehuizing en onderdelen van textiel). De garantie gaat in op het moment van aanschaf en is alleen van toepassing op originele Trionic delen.

Datum aankoop:

Serienummer:

Datum/Handtekening

Trionic USA, INC. • 1545 N.
Verdugo Rd. • Glendale, CA 91208
• USA

info@trionic.us

818-480-1907



TRiONiC