





## Regulacja długości przedniej osi szybkozłacza

Upewnij się, że jest on prawidłowo wyregulowany ze względów bezpieczeństwa!

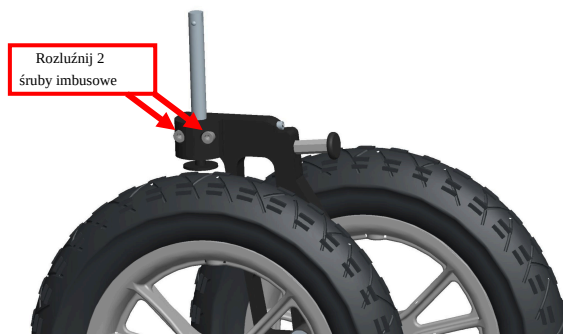

1. Odkręć 2 śruby imbusowe i przesunij oś szybkozamykacza w dół przez widelec, aż będzie widoczna duża nakrętka osi.

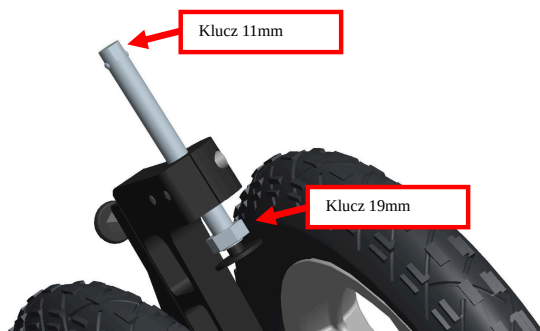

2. Wyreguluj długość osi QR za pomocą kluczy 11 mm i 19 mm. Zapobiegnij obracaniu się osi QR, trzymając ją za koniec kluczem 11 mm. Wyreguluj nakrętkę kluczem 19 mm. Jeśli oś nie blokuje się w ramie, wystarczy dokręcić nakrętkę o  $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$  obrotu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
3. Ponownie dokręć 2 śruby widelca, aby przymocować oś QR do widelca i spróbuj przymocować przednie zawieszenie do ramy. Upewnij się, że jest całkowicie zablokowane na miejscu.

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, zadzwoń do naszego działu obsługi klienta: +46-8-522 100 50