




## Frână cu o singură mână Trionic

Frână cu o singură mână care frânează simultan frâna dreaptă și cea stângă.

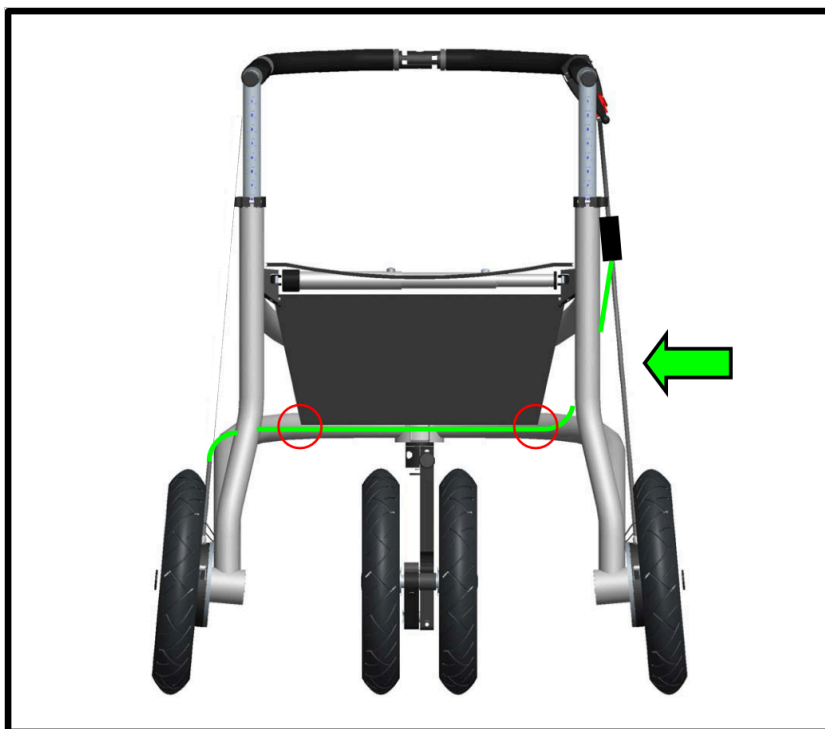


### ① Asamblare: Sistem de frânare cu o singură mână Trionic (imaginea arată partea dreaptă)

1. Montați maneta de frână pe manivelă (cât mai în față posibil).
2. Deșurubați șuruburile (2 x 4 buc.) care fixează capacul frânei drepte și stânga.
3. Atașați cablul scurt de frână la frână, pe aceeași parte cu maneta de frână.
4. Asigurați-vă că șurubul niplului de la capătul cablului este orientat spre exterior (în direcția roții).
5. Treceți cablul de frână mai lung prin cadru (între țeava superioară și inferioară a cadrului).
6. Atașați cablul de frână mai lung la frâna poziționată pe partea opusă a manetei de frână.
7. Tăiați o mică gaură (de 2 ori) prin materialul coșului în fiecare colț inferior din spate (vezi cercurile ROȘII din imagine).
8. Fixați cablul de frână mai lung la coș cu cele 2 coliere de cablu.
9. Reatașați cele 2 capace de frână, folosind cele 2 coliere de cablu cu orificiu de Ø5 mm pentru cele 2 șuruburi superioare (partea dreaptă + stângă).

10. Introduceți una dintre axele cu blocare rapidă a roților ( $\varnothing 12$  mm) prin bucla colierului de cablu și trageți strâns colierul de cablu în jurul axului (asigură tensiunea corectă pentru a evita ca cablul să se frece de anvelopă, dar fără ca cablul de frână să fie forțat în direcția opusă).

11. Cablurile de frână din dreapta și din stânga pot fi reglate individual, utilizând fie șuruburile de reglare poziționate la frână, fie șuruburile de reglare atașate la duplicatorul liniar.

12. Asigurați-vă că frâna de mână blochează complet roata.

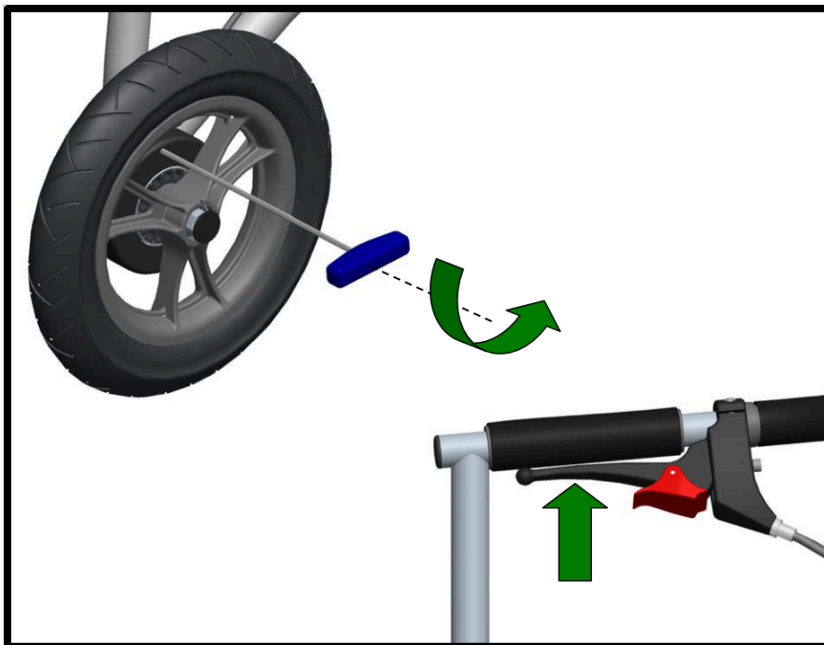

## ② Centrare frânei

1. Deșurubați șurubul colierului de frână cu 3-4 ture (se ajunge prin orificiul capacului frânei).
2. Trageți de maneta de frână și țineți-o strâns.
3. Ținând strâns maneta de frână, strângeți din nou șurubul inelului de frână.
4. Verificați dacă roata se rotește liber, fără a freca între frână/butuțul de frână.

Dacă aveți întrebări, nu ezitați să contactați managerul nostru de produs, Stefan Kindberg; +46-8-522 100 52.