





Регулировка длины передней оси QR

В целях безопасности убедитесь, что он правильно отрегулирован!

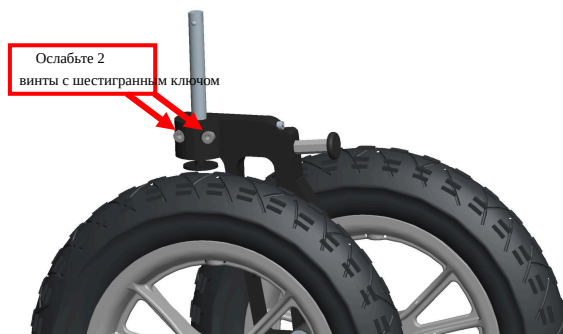

1. Ослабьте 2 винта с шестигранным шлицем и протолкните ось QR вниз через вилку, пока не станет видна большая гайка оси.

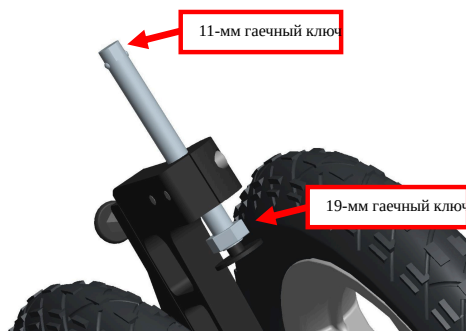

2. Отрегулируйте длину оси QR с помощью гаечных ключей на 11 мм и 19 мм. Удерживайте ось QR от вращения, удерживая ее за конец гаечным ключом на 11 мм. Отрегулируйте гайку гаечным ключом на 19 мм. Если ось не фиксируется в раме, достаточно закрутить гайку на $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ оборота против часовой стрелки.
3. Снова затяните 2 винта вилки, чтобы закрепить QR-ось на вилке, и попробуйте прикрепить переднюю подвеску к раме. Убедитесь, что она полностью зафиксирована на месте.

Если у вас есть вопросы, позвоните в нашу службу поддержки клиентов: +46-8-522 100 50