




Nastavenie dĺžky prednej rýchlopínacej nápravy

Z bezpečnostných dôvodov sa uistite, že je správne nastavený!



1. Uvoľnite 2 skrutky s imbusovým kľúčom a zatlačte osku QR nadol cez vidlicu, kým nebude viditeľná matica veľkej osky.

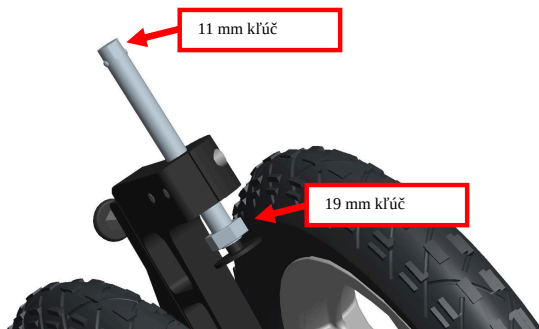

2. Nastavte dĺžku rýchlopínacej osky pomocou kľúčov 11 mm a 19 mm. Zabrňte oske otáčaniu tak, že ju pridržíte na konci pomocou kľúča 11 mm. Maticu nastavte pomocou kľúča 19 mm. Ak sa oska nezaistí v ráme, stačí maticu otočiť o $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ otáčky proti smeru hodinových ručičiek.
3. Znovu utiahnite 2 skrutky vidlice, aby ste pripevnili rýchlopínaciu osku k vidlici, a skúste pripevniť predné odpruženie k rámu. Uistite sa, že je úplne zaistené na svojom mieste.

Ak máte akékoľvek otázky, zavolajte, prosím, na našu zákaznícku podporu: +46-8-522 100 50