

# **TRiONiC**

## **Gelişmiş Kullanıcı Kılavuzu**



## **Trionic Veloped'i seçtiğiniz için teşekkür ederiz!**

Veloped Golfümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz! Hem arazide hem de şehirde birçok keyifli an yaşayacağınızı ve Trionic Veloped Golfünüzün keyfini çıkaracağınızı içtenlikle umuyoruz.

Trionic Veloped Golfü seçerek çok çeşitli avantajlardan yararlanacaksınız ve farklı dış mekan ortamlarına erişiminizi iyileştirecek ve umarız yaşam kalitenizi artıracaktır.

Lütfen kullanmadan önce Kullanım Kılavuzunu dikkatlice okuyun ve tüm yönergeleri, özellikle Güvenlik Talimatlarını izleyin.

Bu kullanım kılavuzu Trionic yürütecinizin ayarlanması ve çalıştırılması için gerekli tüm talimatları içerir.

Bu kullanıcı kılavuzu, tüm kullanıcılara ve destek personeline ürünün güvenli kullanımını sağlamak için bir temel sağlamayı amaçlamaktadır. Kılavuz, yürütecinizin hazırlanması, kullanımı, bakımı ve servisi hakkında bilgi içerir.

Cihazdan makul bir şekilde en iyi şekilde yararlanmak ve kullanım güvenliğini sürdürmek için, belirtilen kullanım talimatlarına her zaman uymalısınız. Kullanıcı kılavuzunun her zaman kullanıcı tarafından erişilebilir olduğundan emin olun.

Bu kullanım kılavuzu teslimat kapsamına dahildir. Daha fazla teknik geliştirme sonucunda bu kılavuzda gösterilen sürümlerde değişiklik yapma hakkımızı saklı tutuyoruz.

Telif hakkı üreticiye aittir. Bu kullanım kılavuzu güncelleme hizmetine tabi değildir.

### **Üçüncü taraflarca yeniden kullanım**

Yürüteci yeni bir kullanıcıya devrederseniz, lütfen güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için gereken tüm teknik belgeleri teslim etmeyi unutmayın. Trionic Sweden AB, yeni bir kullanıcıya devredildiğinde ürünün durumundan sorumlu değildir.

# Gelişmiş Kullanıcı Kılavuzu

## Trionic Veloped 14er L

Veloped benzersiz 3 tekerlekli bir tasarıma sahip, ancak görebileceğiniz gibi aslında dört tekerleği var. Özellikle açık havada fiziksel olarak aktif olma arzusu olan kişiler için bir yürüme yardımcısı olarak kullanılması amaçlanmıştır. Yürümeye odaklanarak ve kullanıcı için erişimi kolaylaştırarak geliştirilen Veloped türünün tek örneğidir. Başlıca özelliği, 15 cm'ye kadar yükseklikteki engelleri aşma kapasitesine sahip çift ön tekerleğidir (14 inç tekerlekler). Daha küçük bir engeli aşmak için gereken kuvvet de geleneksel bir tekerleğe kıyasla büyük ölçüde azaltılmıştır.

Tip:  
Sınıf I Tıbbi Cihaz (MDR 2017/745)

Amaç: Yürüme yardımcısı

Üretici firma:

Trionic USA, INC. · 1545 N. Verdugo  
Rd. · Glendale, CA 91208 · USA  
info@trionic.us  
818-480-1907

Manuel revizyon tarihi: 2025-05-01

## Teknik Veriler

	14er L
Min. yükseklik:	84 cm
Maksimum yükseklik:	104 cm
Genişlik:	79 cm
Uzunluk:	107 cm
Oturma yüksekliği:	65 cm
Koltuk genişliği:	44 cm
Tekerlek boyutu:	14"/36 cm
Katlanmış haldeki boyut Y x U x G:	111 x 42 x 84 cm (U x G x Y)
Tekerleksiz katlanmış halde boyut Y x U x G:	84 x 42 x 68 cm (U x G x Y)
Ağırlık (Spor):	12,5 kg
Tekerleksiz ağırlık:	8,3 kg
Maksimum kullanıcı ağırlığı:	150 kg

## Emniyet

- Koltuğu kullanmadan önce her iki frenin de park modunda kilitlenmesi gerekir.
- Veloped ile yürümeye başlamadan önce tamamen açılmış olduğundan emin olun.
- Dik arazilerde ve eğimli arazilerde ekstra dikkatli olun.
- Veloped'in stabilitesi 5 kg'lık bir sepet yüküyle test edilir. Sepete ek ağırlık yüklerseniz, ağırlığın sepette eşit şekilde dağıtıldığından emin olun.
- ÖNEMLİ: Bu tıbbi cihazı kullanırken ciddi bir kaza/olay yaşamamız durumunda, olayı üreticiye ve ikamet ettiğiniz ülkedeki ilgili tıbbi otoriteye bildirdiğinizden emin olun.

## Dođru Kavrama Yksekliđi



### **Veloped'inizin dođru yksekliđini nasıl ayarlarsınız?**

Birok rollatr kullanıcısı, daha dik bir duruř sađlayacađını dřnerek kavramaları ok ykseđe ayarlar. Ancak bu aslında duruřu ktleřtirir ve dengeyi olumsuz etkiler.

Tm fizyoterapistlerin ve tm yrte reticilerinin nerdiđi řekilde, ařađıdaki adımları izleyerek dođru Veloped kavrama yksekliđini belirleyebilirsiniz:

1. Ayakkabılarınızı giymiř, sırtınızı olabildiđince dik tutarak, kollarınızı vcudunuz boyunca rahat bir řekilde sarkıtarak (dirsekleriniz hafife bklmř řekilde) dik durun.
2. Zeminden bilek kemiđine kadar olan dikey mesafeyi ln = tavsiye edilen kavrama yksekliđi.

### **Tutacaklar bilek hizasında olacak řekilde:**

- Omuzlarınızı kaldırmanıza gerek kalmaz ve vcut ađırlıđınızın daha byk bir kısmını verebilirsiniz.
- Tutacıklara daha yakın yryebilirsiniz, bu da daha dik bir vcut duruřuna sahip olmanızı sađlar.
- Daha dikey (ařađıya dođru) bir ađırlık dađılıımı hem dengeyi hem de fren performansını artırıyor.

## İlk Kullanım



1. Tekerleğin ortasındaki siyah düğmeye basarak ve ardından aksı aks deliğine tamamen iterek arka tekerlekleri çerçevenin arka aks deliklerine takın. Basmalı düğmeyi bırakın.



2. Tekerleklerin düzgün bir şekilde takılıp takılmadığını yanlara doğru çekerek/iterek kontrol edin.



3. Ön tekerlek süspansiyonunu aynı şekilde şasinin ön alt ucuna takın, yani aksın altındaki siyah düğmeye basın ve aksın alt taraftan aks deliğine bastırın. Düğmeyi bırakın.



4. Çerçeveyi yüzeyden kaldırarak ve ön tekerleği aşağı doğru çekerek ön tekerleğin güvenli bir şekilde sabitlendiğini kontrol edin.

5. Hızlı açma kollarını açın ve kavrama yüksekliğini "Doğru Kavrama Yüksekliği" bölümünde açıklandığı gibi ayarlayın.

## Yürüyüş Modu



Veloped'i açmak için tutma çubuğu kollarını yanlara doğru, birbirinden uzağa doğru çekin.



Veloped'in yürüme modunda kilitlendiğini kontrol edin; açarken teleskopik desteğin yerine kilitlenmesinden gelen tık sesini duyduğunuzdan emin olun.




Koltuk ileri ve geri kaydırılabilir. Maksimum yürüme alanı elde etmek için öne doğru itin.

Koltuğu kullanmadan, sepete ulaşmadan veya Veloped'i katlamadan önce koltuğu arkaya doğru çekin.

## Veloped'in Katlanması




Koltuđu arkaya dođru çekin.

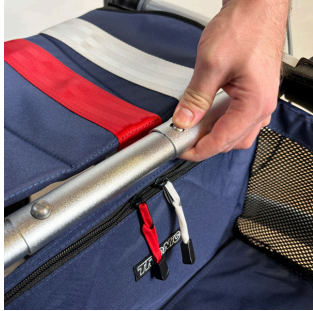


Teleskopik desteđin sađ tarafındaki düđmeye basın.

Düđmeyi basılı tutarken sađ veya sol elinizin tutma yerini biraz yukarı kaldırın ve çerçeveyi yarıya kadar katlayın.

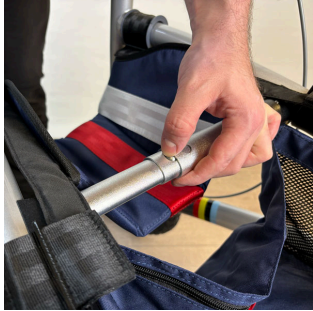


Teleskopik desteđin solundaki diđer düđmeye basın.

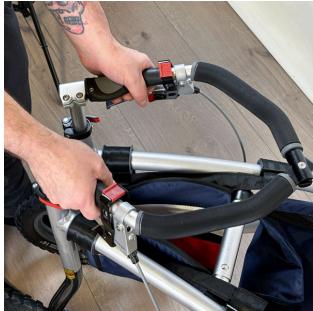

Düđmeyi basılı tutarken sađ veya sol el tutamađını biraz yukarı kaldırın ve çerçeveyi tamamen katlayın.

## El freni

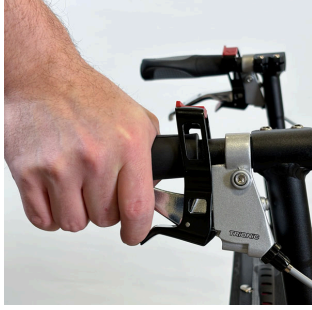

Park frenini 3 farklı şekilde devreye sokabilirsiniz.

**Seenek 1:** Alt kırmızı park tetiđini iřaret parmađınızla ařađı dođru itin, aynı anda fren kolunu ekin. Park freninin devrede olduđundan ve Veloped'in hareket etmediđinden emin olun.



**Seenek 2:** Üst kırmızı park tetiđini bařparmađınızla geriye dođru ekin, aynı anda fren kolunu ekin. Park freninin devrede olduđundan emin olun.



**Seenek 3:** Her iki elinizi de kullanın. Bir elinizle üst kırmızı park tetiđini geriye dođru ekerken, diđer elinizle fren kolunu ekin. Park freninin devrede olduđundan emin olun.

Park frenini serbest bırakmak için, hareket frenini kullanırken yaptığınız gibi fren yapın.



## Hareket Freni

Hareket frenini alıřtırmak için fren kolunu yukarı dođru ekin. Her iki kolu aynı anda kullanarak fren yapın.

## Kavrama Yüksekliđi Ayarı



Her iki hızlı açma kolunu da dışarı doğru katlayarak serbest bırakın.

Tutacakları önerilen yüksekliğe ayarlayın, en uygunu kollar serbestçe sarkarken bilekten yere kadar olan dikey mesafedir. Ölçmek için yardım kullanın!



**NOT:** Kavrama çubuđunu ayarlamanın en kolay yolu, koltuđa oturduđunuz zamandır; bu şekilde yükseklik gösterge işaretlerini net bir şekilde görebilir ve yükseklik ayarını basitleştirebilirsiniz.



Her iki hızlı açma kolunu içeriye doğru katlayarak kilitleyin.



**NOT!** Kanat somunları veya vidalar gibi hızlı serbest bırakma kollarını çalıştırmayın. Kullanıcının Veloped'i kullanırken kolları yanlışlıkla serbest bırakma riski varsa, hızlı serbest bırakma kolları vidalar ve somunlarla değiştirilebilir.

## **Kavrama Açısı Ayarı**

Kavrama açıları ayarlanabilir, böylece rahat bir el pozisyonu ve optimum destek elde edebilirsiniz.



1. Tutacağın arka ucundaki vidayı 4 mm'lik Allen anahtarıyla gevşetin.




2. Tutacağı istediğiniz açığa çevirin/döndürün.



3. Kavramanın arka ucundaki vidayı 4 mm'lik alyan anahtarıyla sıkın.

## Arka Tekerleklerin Çıkarılması/Takılması

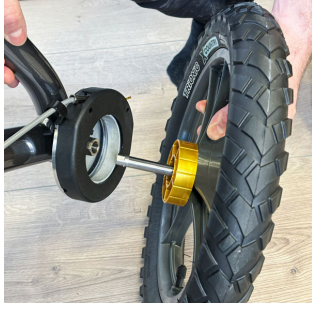

Veloped'in taşınmasını kolaylaştırmak için arka tekerlekler çıkarılabilir.

Tekerleği çıkarmak için tekerleğin ortasındaki siyah düğmeye basın ve tekerleği çekerek çıkarın.



Tekerleği takmak için, tekerleğin ortasındaki siyah düğmeye basın ve tekerlek aksını aks deliğine itin. Tekerlek son konumuna geldiğinde düğmeyi bırakın.

Lastiği tutun ve tekerleği yana doğru ileri geri itin/çekin; tekerleğin düzgün bir şekilde sabitlenip sabitlenmediğini kontrol edin.



## Fren Ayarı

1. Frenler zayıf çalışıyorsa, her fren kolundaki ayar vidasını gevşetin (saat yönünün tersine) ve kilitleme somununu tutamağa doğru (saat yönünde) vidalayarak yerine sabitleyin.



Frenler hala zayıf çalışıyorsa, perakendecinizle veya Trionic Veloped'inizin servisinden sorumlu kişiyle iletişime geçin.

## Ön Tekerleği Çıkarma/Takma



Veloped'in taşınmasını kolaylaştırmak için ön tekerlek süspansiyonu çıkarılabilir.

Ön tekerlek süspansiyonunu serbest bırakmak için ön menteşenin altındaki siyah düğmeye basın.



Tekerlek süspansiyonunun tamamını çıkarmak için, tekerlek süspansiyonunu aşağı doğru çekerken şasinin ön ucunu kaldırın.



Ön tekerlek süspansiyonunu takmak için, çerçevenin ön ucunu kaldırın, siyah düğmeye basın ve tekerlek aksını çerçevenin altına yerleştirilen aks deliğine itin. Siyah basmalı düğmeyi bırakın.



## Hava Basıncı

Lastik hava basıncını düzenli olarak kontrol edin. Trionic 1,5 bar/22 psi lastik basıncı öneriyor. Maksimum lastik hava basıncı 2,5 bar/35 psi'dir.

## Ön Tekerlek Ayarını Deęiřtirin

Direksiyonun iki farklı ayarı vardır: biri kolay yönlendirme için, dięeri ise yön sabit modu için. Ön tekerlekte, tekerleklerin arasına yerleřtirilmiř, bu iki ayar arasında geçiř yapilabilen bir ayar kolu vardır.

### **Kolay direksiyon modu/Alt konum:**

Tırmanma kapasitesi korunarak kolay dönüř imkânı sunar.

### **Yön-sabit mod/Üst pozisyon:**

Arttırılmıř tırmanma kapasitesi, engebeli yüzeylerde süspansiyon ve daha yüksek yönel denge sunar. Veloped'in yönlendirilmesi daha zordur, ancak arazide daha iyi performans gösterir.



Ayar koluna daha kolay ulaşabilmek için ön tekerleęi 180 derece çevirin.



1. Sol elinizle sol tekerleęi tutun ve Veloped'in ön kısmını yerden hafifçe kaldırın.

2. Veloped'i sol elinizle yukarıda tutarken, saę elinizle kırmızı düęmeyi kavrayın ve dışarıya (kendinize doęru) doęru çekin.



3. Ayarlayıcıyı (saę el) ařaęı veya yukarı doęru kaydırın. Ayarlayıcıyı en alt veya en üst uç konumuna kaydırmanız önemlidir.

4. Kırmızı düęmeyi bırakın, düęme geri yaylanarak ön tekerleęi seçtięiniz ayara kilitleyecektir.

## Sepetin Çıkarılması/Takılması

Trionic Veloped'in sepeti 22 litrelik yükleme kapasitesine sahiptir. Değerli eşyalar ve daha küçük nesnelere için arka ucunda küçük bir fermuarlı cebi vardır. Veloped sepeti çıkarılabilir ve üç cırt cırtlı bölümlerle çerçeve sepet raylarına takılır.



1. Arka cırt cırtlı kanatları alt taraftan, çerçeve ile sepet rayı arasından rayların etrafına sarın. Bunları içe doğru katlayın ve cırt cırtlı bölümleri sepet astarının iç kısmına sabitleyin.



2. Ön taraftaki cırt cırtlı kapağı da aynı şekilde takın.



3. Gerekirse sepetin düzgün bir şekilde sabitlendiğinden emin olmak için cırt cırtlı bölümleri ayarlayın.


NOT! Sepeti çerçeveye takmadan önce plastik plakayı sepetin alt manşonuna yerleştirdiğinizden emin olun.

## Koltuğun Çıkarılması/Takılması

Veloped'in sürgülü koltuğu, dokuz adet basmalı düğmeyle sabitlenen bir oturma tabanı ve çıkarılabilir bir kılıftan oluşuyor.



1. Trionic yazısı sağda olacak şekilde koltuk kılıfını tutun. Uzun kapağı teleskopik destek ile koltuk tabanı arasına sarın.

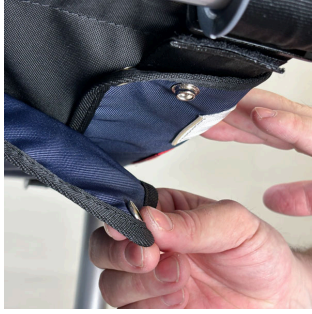

2. Uzun kapağın ön tarafındaki üç adet basmalı düğmeyi koltuk tabanına takın.

3. Kısa kapaktaki üç adet basmalı düğmeye basarak koltuk tabanına yerleştirin.



4. Son olarak uzun kapağın son üç basmalı düğmesini kısa kapağın üzerine bastırın.

## Güvenlik Talimatları

Kullanmadan önce Trionic Veloped'inizin düzgün çalıştığını kontrol edin:

- Hareket ve park freninin çalışmasını kontrol edin.
- Çerçevenin açık yürüyüş modunda kilitlendiğinden emin olun.
- Tutma çubuğunun doğru yükseklikte düzgün bir şekilde sabitlendiğini kontrol edin.
- Çerçeveyi açarken ön tarafa temas etmekten kaçının, sıkışma riski vardır.
- Kullanıcının ağırlığı 150 kg'ı geçmemelidir.
- Trionic Veloped'i tekerlekli sandalye olarak veya insan taşımak için kullanmayın.
- Veloped, özellikle dış mekanlarda yürüme yardımcısı olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

## Servis Talimatları

Fonksiyonun ve güvenliğin devamlılığı için aşağıdakilerin düzenli olarak yapıldığından emin olun:

- Veloped'i normal bulaşık deterjanı, su ve bulaşık beziyle temizleyin. İyice kurduğundan emin olun.
- Tekerlekleri bulaşık deterjanı, su ve plastik fırça ile temiz tutun.
- Vidaların ve kolların düzgün şekilde sıkıldığını kontrol edin.
- Veloped'iniz mükemmel durumda değilse: Lütfen Trionic Veloped'inize servis verme yetkisi olan perakendeciniz/bayiniz veya servis temsilcinizle derhal iletişime geçin.

Lastik basıncını her 4-5 haftada bir kontrol ettiğinizden emin olun. Trionic 1,5 bar/22 psi lastik basıncı öneriyor.

Trionic, önceden izin alınmadan üründe yapılan değişikliklerden (ayarlamalar veya yetersiz onarımlar) sorumlu değildir.

## Garanti

Trionic Veloped, normal aşınmaya maruz kalan parçalar (lastikler, iç lastikler, fren balataları, fren kabloları, fren kablosu yuvaları, tutma yerleri ve tekstil parçaları) hariç olmak üzere 10 yıllık bir garantiye sahiptir. Garanti, satın alma tarihinden itibaren geçerlidir ve yalnızca Trionic orijinal parçalarını kapsar.



CE – Trionic Sverige AB, bu Sınıf I Tıbbi Cihazın AB yönetmeliği MDR 2017/745 gerekliliklerini karşıladığını ve ISO 11199-2:2021 sertifikasına sahip olduğunu garanti eder.




## Etiket

Veloped, rollatörler için uluslararası standart olan ISO 11199-2:2021'e göre test edilmiş ve onaylanmıştır ve tıbbi cihazlar için AB yönetmeliği MDR 2017/745'in gerekliliklerini karşılamaktadır.

Kullanıcının ağırlığı 150 kg'ı geçmemelidir.

- |   |  |
|---|--|
| 1. Ürün adı   | 10. ISO 11199-2:2021 sertifikalı rollatör          |
| 2. Maksimum kullanıcı ağırlığı                        | 11. Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz. |
| 3. Uzunluk  | 12. Ürün Kodu: GTIN13                              |
| 4. Genişlik   | 13. Üretici firma                                  |
| 5. Maksimum ve minimum yükseklik                      | 14. CE işareti                                     |
| 6. Üretim Tarihi                                      | 15. Çevre Dostu                                    |
| 7. UDI/Dijital Ürün Pasaportu: GS1 QR kodu (AIDC/HRI) | 16. Tıbbi Cihaz                                    |
| 8. Seri numarası                                      | 17. MDR 2017/745'e göre onaylanan yardım           |
| 9. Makale Numarası                                    |  |

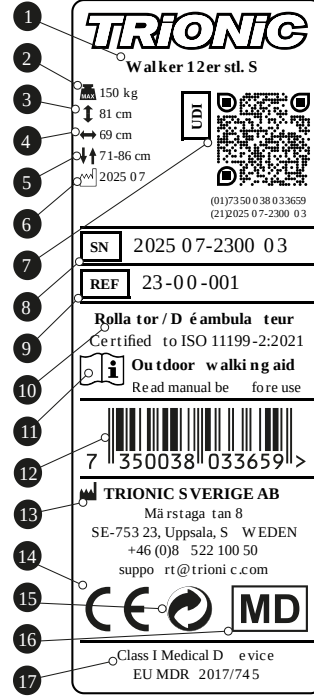

## Çevre Dostu

Trionic Veloped, yaşam döngüsü boyunca çevre üzerinde mümkün olduğunca az olumsuz etki yaratacak şekilde üretilmiştir. Ürün amacına ulaştığında hurdaya çıkarılabilir ve parçalar geri dönüştürülebilir.

- Ürünün alüminyum bileşenleri geri dönüşüm için sıralandığında kalan parçalardan ayrılır. Parçalar metal, plastik ve karışık malzemeler olarak sıranılır.
- Ürünün büyük kısmı alüminyum, çelik ve plastikten oluşuyor.
- Karışık malzemelerden yapılmış parçalara örnek olarak fren kolları, tekerlekler ve tutma çubuğu verilebilir.
- Geri dönüştürülebilir malzemeyi nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz lütfen yerel yetkililere başvurun; çünkü farklı belediyeler/geri dönüşüm şirketleri farklı geri dönüşüm yöntemleri izlemektedir.

Trionic Sverige AB, Repak Ltd Ireland ve İngiltere'deki Valpak Limited'in bir üyesidir ve 20 Aralık 1994 tarihli Ambalaj ve Ambalaj Atığı ile ilgili Avrupa Direktifini tam olarak uygulamaktadır.



## ***Veloped Video Ürün Tanıtımları***

Akıllı telefonunuzdaki talimatları izleyin. Kamera uygulamanızı açın, QR koduna doğrultun ve ekranınızda bir bildirim veya bağlantı görünene kadar telefonunuzu sabit tutun. Bağlantıyı açmak ve videoyu izlemeye başlamak için bildirim dokununuz. Ayrıca, bilgisayarınızda videoya doğrudan erişim için bir manuel bağlantı sağlanmıştır. Herhangi bir sorun yaşarsanız veya daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa destek ekibimize iletişime geçmekten çekinmeyin.

### ***Veloped araç bagajına nasıl yerleştirilir?***

Veloped'i katlamak ve arabanın bagajına koymak kolaydır. Yürüteç Veloped'i aracınıza yüklemenin ne kadar hızlı ve kolay olduğunu gösterirken izleyin.



Devamını oku : [qr.trionnic.info/trunk](http://qr.trionnic.info/trunk)

### ***Veloped'imin frenlerini nasıl ayarlarım?***

Veloped/Walker'ınızı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için, zamanla frenleri aşındıkça ayarlamamız gerekir. Frenleri ayarlamak için 8 mm'lik bir anahtar gerekir.



[qr.trionnic.info/brakes](http://qr.trionnic.info/brakes)

# Garanti Belgesi

Trionic Veloped, normal aşınmaya maruz kalan parçalar (lastikler, iç lastikler, fren balataları, fren kabloları, fren kablosu yuvaları, tutma yerleri ve tekstil parçaları) hariç olmak üzere 10 yıllık bir garantiye sahiptir. Garanti, satın alma tarihinden itibaren geçerlidir ve yalnızca Trionic orijinal parçalarını kapsar.

Satın Alma Tarihi:

Seri numarası

Tarih/İmza

Trionic USA, INC. • 1545 N.  
Verdugo Rd. • Glendale, CA 91208  
• USA

[info@trionic.us](mailto:info@trionic.us)

818-480-1907



**TRIONIC**