11-90-038



Portabotellas Veloped – Instrucciones de montaje


Portabotellas universal para Veloped y andador, que se fija al cuadro del Veloped con una abrazadera. Color: negro.

La entrega incluye un portabotellas, una abrazadera y una llave Allen de 3 mm.

Escanee el código QR con su teléfono inteligente o dispositivo para ver las indicaciones en el vídeo.



1 Desatornille y retire un tornillo del soporte de la abrazadera.

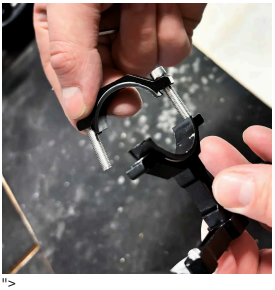

2 Desatornille el otro tornillo lo máximo posible, pero déjelo fijado a la abrazadera.

">



3 Gire la mitad de la abrazadera 90 grados para facilitar su montaje en el cuadro Veloped. Con el brazo corto del portabotellas hacia arriba, fije la abrazadera a la parte vertical del tubo trasero derecho o izquierdo del cuadro del Veloped. Al atornillar la abrazadera al cuadro del Veloped, asegúrese de que ambos tornillos estén apretados por igual.



"> 4 Afloje los dos tornillos del soporte de la abrazadera y luego atornille el soporte de la botella, preferiblemente con la abertura lateral del soporte de la botella hacia afuera.



"> 5 El portabotellas Veloped ya está correctamente montado y listo para usar. ¡Bien hecho!